


(Botón AMT G-JET)

¿Qué es una sonda AMT G-JET?

Hay diferentes marcas de sondas gastroyeyunales. AMT G-Jet es una de ellas. Es una sonda tipo botón. Tiene un globo lleno de agua para evitar que se salga la sonda.

Una sonda gastroyeyunal es una sonda de alimentación. Pasa por el estómago hasta el intestino. La G significa gástrico, que es el estómago. La Y significa yeyuno, que es una parte del intestino. A menudo, una sonda gástrica se cambia por una gastroyeyunal. Esto le permite administrar la alimentación al intestino delgado.

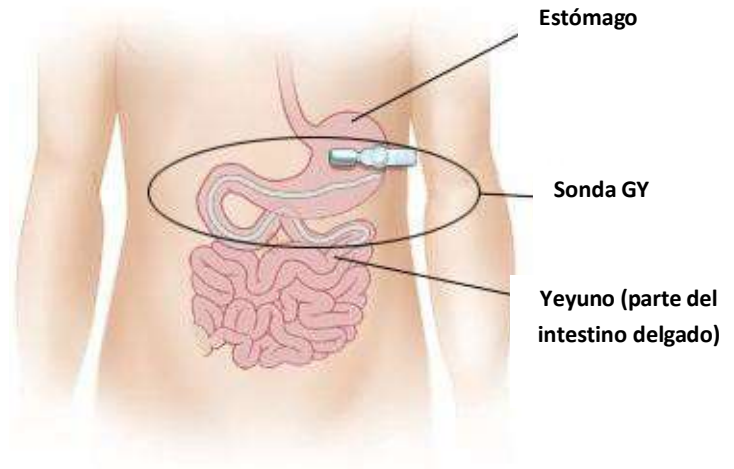

Puertos

Hay tres puertos en el botón AMT G-JET:

1. Puerto **yeyunal** = Puerto Y de color verde brillante.
 - Este puerto se utiliza para administrar alimentaciones, líquidos y medicamentos en el yeyuno.
 - El puerto Y de color verde brillante necesita la punta de color verde brillante en el extremo del juego de extensión.
2. Puerto **gástrico** = Puerto G de color blanco.
 - El puerto gástrico de color blanco necesita la punta de color blanco en el extremo del juego de extensión.
3. Puerto del **globo** = El puerto BAL
 - Puerto que se utiliza para inflar el globo de agua. No revise la cantidad de agua en el globo. Si lo hace, la sonda se puede salir.



¿Por qué tiene mi hijo una sonda gastroeyunal?

Algunos niños tienen dificultad para tolerar la alimentación en el estómago. Cuando esto sucede, no logran aumentar de peso. Es posible que necesiten ser alimentados en los intestinos, pasando el estómago.

Razones por las que puede ser necesaria la alimentación en los intestinos:

- Vaciado lento del estómago.
- Náuseas y vómitos durante la alimentación.
- Dolor estomacal intenso.
- Problemas respiratorios.

¿Durante cuánto tiempo mi hijo tendrá una sonda gastroeyunal?

La mayoría de los niños necesitan una sonda gastroeyunal por periodos breves. Una vez que le hayan colocado la primera sonda gastroeyunal, alimentará a su hijo a través del puerto yeyunal. Cuando la alimentación se realice sin problemas, se intentará alimentarlo por el puerto gástrico. Algunos niños pueden tolerar más tarde la alimentación en el estómago. Si su hijo tolera la alimentación por el estómago, ya no necesitará la sonda gastroeyunal. La pueden cambiar por una sonda de gastrostomía (sonda G).

Si su hijo necesita una sonda gastroeyunal durante más de 6 a 12 meses, el médico de su hijo tal vez hable con usted sobre la posibilidad de una yeyunostomía permanente (sonda yeyunal).

Cuidado especial de una sonda gastroeyunal AMT G-JET tipo botón

Visite www.chw.org/gtube para ver videos sobre cómo cuidar a un niño con una sonda gastroeyunal.

No gire la sonda gastroeyunal, ya que puede causar que se fuerza o se mueva fuera de lugar. Está bien si se mueve o gira por sí sola.

Alimentación

Siempre administre alimentaciones continuas con la bomba de alimentación cuando lo haga a través del puerto yeyunal. Nunca administre cantidades grandes de alimentos en los intestinos en un periodo corto de tiempo, ya que los niños no pueden tolerar una cantidad grande de líquidos a la vez. Si las alimentaciones son demasiado rápidas o grandes, es posible que su hijo vomite, defaque mucho o tenga dolor estomacal.

Medicamentos

Pregúntele al médico de su hijo si debe administrar el medicamento por el puerto gástrico o el puerto yeyunal.

Los medicamentos funcionan mejor si se administran en forma líquida. Las pastillas trituradas y los medicamentos espesos pueden tapar fácilmente la sonda. Si necesita darle pastillas, triture el medicamento hasta obtener un polvo fino y mézclelo con suficiente agua para que no haya grumos. Enjuague la sonda antes, después y entre cada medicamento.

Enjuagues

Las sondas gastroyeyunales se necesitan enjuagar a menudo para evitar que se tapen.

- Enjuague el puerto yeyunal con 2 a 5 mL de agua. Es importante hacer esto cada 4 horas, incluso si la alimentación continúa.
- Enjuague el puerto yeyunal antes, entre y después de administrar todos los medicamentos.
- Si su hijo se toma un descanso entre las alimentaciones, enjuague después de que termine de alimentarlo.
- Si los líquidos del puerto gástrico se mueven lentamente, enjuague la sonda con 2 a 5 mL de agua. Haga esto por lo menos una vez al día. Pregúntele al médico o enfermera de su hijo si esto podría ayudar.

Puerto gástrico

Algunos niños pueden tolerar que se les sujete el puerto gástrico con una abrazadera. Otros pueden necesitar que se ventile o que se coloque hacia abajo. El médico o enfermera le ayudará a decidir lo que es mejor para su hijo y le enseñarán cómo hacerlo.

Cambios de rutina de la sonda gastroyeyunal

Las sondas gastroyeyunales se deben reemplazar en Radiología Intervencionista cada 3 a 4 meses.

- Llame de lunes a viernes de las 8:00 a.m. a las 4 p.m. al (414) 266-3152 para hacer una cita.

¿Qué problemas pueden ocurrir con una sonda gastroyeyunal?

Rara vez, la sonda puede provocar un hoyo en los intestinos. **Esto es una emergencia.**

Busque ayuda inmediatamente. **Las señales de esto pueden incluir fiebre y dolor estomacal intenso.**

Puede parecer aterrador, pero no es una emergencia, si la sonda gastroyeyunal tiene un problema:

- No venga a la Sala de Emergencias a menos que sea necesario. Es mejor llamar primero a Radiología Intervencionista. Si viene a la Sala de Emergencias en la tarde-noche o noche, la sonda gastroyeyunal de su hijo no se reemplazará hasta el día siguiente.
- Es mejor llamar a Radiología Intervencionista si no sabe qué hacer.
- Si hay algún problema que requiera que le cambien la sonda a su hijo, llame a alguno de los números a continuación.
- Si hay algún problema durante las horas regulares de programación de citas, llame inmediatamente.
- Si hay algún problema después del horario de oficina o en fin de semana, llame a Radiología Intervencionista la mañana siguiente para que le cambien la sonda gastroyeyunal.

Día	Horario	Teléfono de Radiología Intervencionista
Lunes a viernes	Horario de programación de citas 8:00 a.m. a 4:00 p.m.	(414) 266-3152
Entre semana fuera del horario de oficina y fines de semana	Después de las 4:00 p.m.	(414) 266-3116

Cada niño tiene un plan diferente hasta que la sonda gastroyeyunal se pueda fijar o cambiar. La mayoría de los niños pueden estar sin alimentaciones ni líquidos durante 12 horas sin que les cause daño. Esto dependerá de la edad y las necesidades médicas especiales de su hijo. El médico o enfermera deben hablar con usted sobre el plan emergente de alimentación de su hijo.

- Algunos niños pueden tolerar las alimentaciones lentas o Pedialyte en sus estómagos.
- Algunos niños no pueden tolerar nada en sus estómagos pero pueden esperar a que les cambien la sonda gastroyeyunal.
- Algunos niños pueden necesitar líquidos intravenosos. Es posible que su hijo tenga que ingresar al hospital mientras la sonda no funcione.

Problema	Causas	Soluciones
La sonda gastroyeyunal está tapada	<ul style="list-style-type: none"> • El medicamento puede estar atorado en la sonda. • Puede haber acumulación de alimentos o fórmula en la sonda. 	<ul style="list-style-type: none"> • Intente enjuagar el puerto con agua tibia, agua mineral o agua gasificada. Use una jeringa de 3 mL y empuje y jale el émbolo para destapar la sonda. Es de ayuda dejar el agua en la sonda durante 20 minutos e intentarlo otra vez. No use refresco ni jugo para destapar la sonda. • Si no puede enjuagar el puerto yeyunal después de intentar lo anterior, llame al médico de su hijo o a Radiología Intervencionista.
La sonda gastroyeyunal se salió	<ul style="list-style-type: none"> • Jalaron la sonda. • El agua en el globo se desinfló o el globo se rompió. 	<p>Si esta es la primera sonda de su hijo y nunca se la han cambiado antes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No intente poner nada en el tracto. Cubra el estoma. • De lunes a viernes de las 8:00 a.m. a las 4:00 p.m. llame a Radiología Intervencionista. • Después de las 4:00 p.m. o en fin de semana, lleve a su hijo a la Sala de Emergencias.

		<p>Si esta no es la primera sonda de su hijo y se la han cambiado antes:</p> <p>1. Si tiene una sonda gástrica de repuesto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reemplácela si le dijeron cómo hacerlo. • Si coloca la sonda con éxito y si le dijeron que su hijo puede tolerar alimentaciones lentas o Pedialyte en el estómago, puede intentar esto. Llame a Radiología Intervencionista para programar el cambio de una sonda gastroyeyunal. <p>2. Si no tiene una sonda gástrica de repuesto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intente poner la punta de la sonda gastroyeyunal en el tracto 2 pulgadas y asegúrela con cinta. Esto evitará que se cierre el tracto. • Si no puede colocar nada en el tracto, llame a Radiología Intervencionista o al médico de su hijo para que le den indicaciones.
<p>Si parte de la sonda gastroyeyunal se sale</p> <p>Es posible que su hijo vomite la fórmula o que tenga dolor estomacal si esto sucede.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La sonda que se colocó en los intestinos pudo haberse torcido y movido hacia el estómago. 	<ul style="list-style-type: none"> • Si le dijeron que su hijo puede tolerar alimentaciones lentas o Pedialyte en el estómago, puede intentar esto. Llame a Radiología Intervencionista para programar el cambio de una sonda gastroyeyunal.

Para obtener más información sobre la salud y el bienestar, consulte este recurso:
<https://kidshealth.org/ChildrensWI/es/parents>

Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo o familiar. Esta hoja no reemplaza la atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento.