


Sonda larga MIC

¿Qué es una sonda larga MIC?

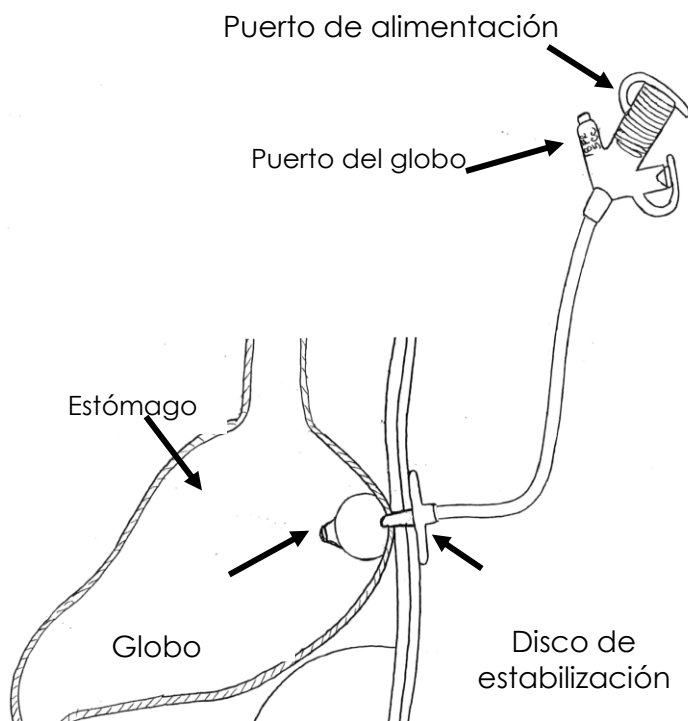

La sonda larga MIC es un tipo de sonda de alimentación. Se mantiene en su lugar en el estómago por medio de un globo de agua.

A algunos niños se les coloca una sonda MIC como su primera sonda de alimentación. Si esta es la primera sonda de su hijo, necesitará permanecer en su lugar durante al menos 6 semanas antes de cambiarla. Esto es necesario para la sanación del tracto. Pasado este tiempo, el médico o enfermera cambiará la sonda y le enseñará cómo hacerlo en casa.

Si le han cambiado a su hijo una sonda por una sonda larga MIC, le enseñarán cómo cambiarla.

¿Por qué tiene mi hijo una sonda larga MIC?

Usted y el médico de su hijo decidieron que este tipo de sonda de alimentación sería la mejor para su hijo en este momento.

El tamaño de la sonda larga MIC de su hijo es_____.

¿Cómo cuido la sonda larga MIC?

Consulte el Cuaderno de Cuidado de un niño con una sonda de gastrostomía o vaya a www.chw.org/gtube.

Información y videos en el sitio web:

- Limpiar el sitio
- Administrar alimentaciones
- Enjuagar la sonda
- Administrar medicamentos
- Ventilar la sonda
- Problemas comunes de la piel

Puerto del globo

Hay un puerto en un costado. Allí es donde puede agregar o retirar agua del globo. Si nunca le han cambiado el botón a su hijo, **no** revise la cantidad de agua en el puerto del globo.

Para revisar la cantidad de agua en el globo:

1. Coloque una jeringa de punta deslizable en el puerto del globo.
2. Jale el émbolo. Vea la cantidad de agua.
3. Añada más agua embotellada, destilada o estéril al puerto del globo de ser necesario.



¿Cómo remplazo la sonda?

Si esta es la primera sonda de su hijo, **no** debe remplazarla hasta que le digan que puede hacerlo.

Si ya le han cambiado la primera sonda a su hijo, necesita tener una sonda larga MIC del mismo tamaño en casa.

Cambie la sonda cada 3 a 6 meses o antes si falla. Es importante revisar el contenido gástrico después del cambio de sonda.

Otras hojas de enseñanza que pueden ser útiles:

- [No. 3008](#) Cómo colocar la sonda larga gástrica o yeyunal

¿Qué problemas pueden presentarse con la sonda larga MIC?

Problema	Causas	Soluciones
Filtración de la fórmula o jugos estomacales en el sitio donde la sonda está en la piel	<ul style="list-style-type: none"> • Está suelto el disco de estabilización. • Se rompió el globo o le quitaron el agua. • El niño está enfermo. Algunas veces cuando su hijo está enfermo y está tosiendo o vomitando, hay una filtración en el sitio. 	<ul style="list-style-type: none"> • Revise la cantidad de agua en el globo. De ser necesario, añada más agua. Si nunca le han cambiado la sonda a su hijo, no revise la cantidad de agua en el puerto del globo. • Llame al médico o enfermera de su hijo si la filtración continúa sucediendo o si no puede arreglar este problema.

<p>El globo no se desinfla</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se tapó el puerto del globo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nota: Si esta es la primera sonda de su hijo, no debe revisar el globo de agua. Llame a la clínica para hablar con la enfermera o el médico para que le dé indicaciones. • Suavemente gire la jeringa de punta deslizable en el puerto del globo hasta que se abra la válvula. Limpie el puerto del globo usando un aplicador húmedo con punta de algodón. Conecte una jeringa e intente de nuevo. Llame a la clínica para hablar con la enfermera o médico si esto no funciona.
<p>La sonda parece estar muy apretada o muy suelta</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se movió el disco de estabilización en la sonda. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mueva el disco de estabilización de manera que descansa suavemente en la piel. Si continúa moviéndose, puede poner un pedazo de cinta alrededor de la sonda sobre el disco para evitar que se mueva.

Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo o familiar. Esta hoja no reemplaza la atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualesquier preguntas o inquietudes o si:

- Es la primera sonda de su hijo y se salió.
- El sitio de la sonda se está cerrando.
- Su hijo tiene problemas de alimentación como vómitos o náuseas.
- No puede girar la sonda en el tracto